


LCV 4050 - 361L - porte pleine



LES PLUS PRODUITS




Système d'air canalisé avec double ventilateur axial et protections anti-congélation. (réfrigérateur)

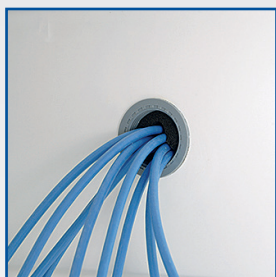

Passage de cuve Ø 30mm pour caractérisation/qualification sur site, positionné sur la porte à 1/3 du haut (pour chaque compartiment).



Passage cuve Ø 15 mm pour sonde GTC (Gestion Température Centralisée) - PT100 ou numérique.

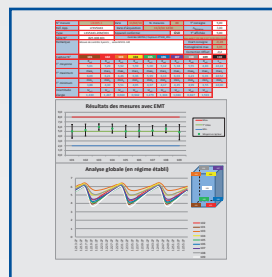

Chaque appareil est livré avec sa cartographie de contrôle et réglage 9 points. Caractérisation effectuée d'après la norme FD X15-140 en température d'air pour une ambiance de 22°C

CONSTRUCTION

- Refroidissement ventilé +5°C ± 2°C (réfrigérateur) et statique -25°C ± 5°C (congélateur)
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique sur réfrigérateur et manuel sur congélateur
- Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation (réfrigérateur)
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm (réfrigérateur) et 70mm (congélateur)
- Portes avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- Rappel des portes automatique
- Poignées à dépression
- Équipé de 4 grilles acier plastifiées 478x420 charge max 45kg (réfrigérateur) et 3 tiroirs transparents sur tablettes verre charge max 24kg (congélateur)

OPTIONS

- OP 18C : réglage de la température de consigne à +4°C ± 2°C
- OP 18B : réglage de la température de consigne à +6°C ± 2°C
- OP 48B : alarme + traçabilité autonome dans boîtier monté sur le dessus de l'appareil - (lxpxh) 150x60x100mm
- OP 14D : enregistreur à disques 7 jours monté dans boîtier laissé en attente avec câble 1,5m. - (lxpxh) 240x90x160mm

RÉGULATION


- Double régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 0,1 °C (réfrigérateur et congélateur)
- Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables)
- Alarme ouverture de porte visuelle et sonore
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde de la température mini et maxi
- Connexion série RS 485 pour traçabilité température et alarmes centralisée sur PC (via interface & logiciel en accessoire)
- Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C (réfrigérateur)

ACCESSOIRES


- Grille acier plastifiée (lxp) 478x420 mm
- Tiroir aluminium télescopique
- Enregistreur mobile EJ 32 IN

LIEBHERR

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

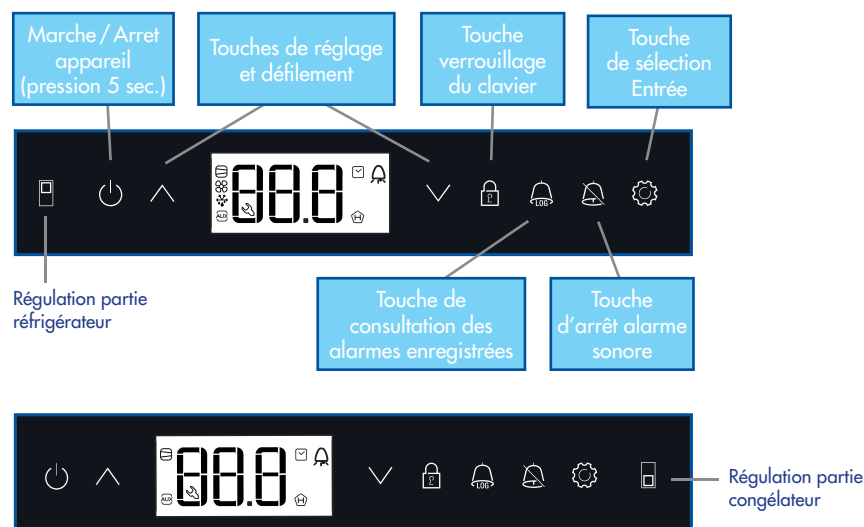

ERGONOMIE

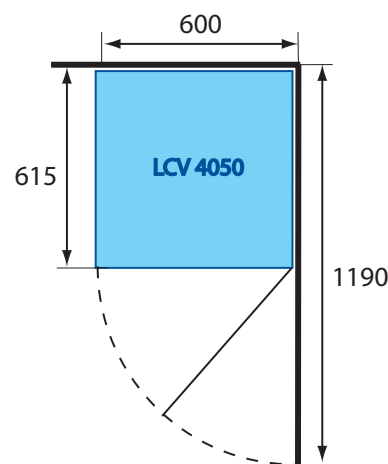

Largeur réduite 600 mm
Portes pleines réversibles avec serrures
Rappel automatique à 45°, stable à 90°

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LCV 4050	
Volume brut/utile (l.) Total	361/345
Réfrigérateur	254/240
Congélateur	107/105
Homogénéité de la température ¹ (réfrigérateur/congélateur)	+ 5°C ± 2°C / - 25°C ± 5°C
Plage de réglage de la température (réfrigérateur/congélateur)	+ 3° à + 16°C / - 5° à - 30°C
Résolution & réglage	0,1°C
Hygrométrie	65 - 75%
Refroidissement (réfrigérateur/congélateur)	ventilé/statique
Dégivrage (réfrigérateur/congélateur)	automatique/manuel
Évaporateur (réfrigérateur/congélateur)	arrière vertical/périphérique
Condenseur	statique
Fluide	R-600a
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	260
Consommation électrique (kWh/24h)	1,98
Dégagement calorifique (W/h)	111
Classe climatique	7 (+ 35°C)
Niveau sonore (dBA)	52
Équipement	
Réfrigérateur : Type	grilles acier plastifié
Nb / dimensions (lxp) (mm)	4 / 478x420
Nb max / hauteur de réglage (mm)	25 / 32
Charge admissible par tablette (kg)	45
Congélateur : Type	tiroirs transparents sur tablettes verre
Nb / dimensions (lxp) (mm)	2 / 425x385x155 + 1 / 425x210x160
Charge admissible par tiroir/tablette (kg)	24
Charge admissible par appareil (kg)	220
Dimensions / Poids	
Appareil (lxpxh) (mm)	600x615x2000
Cuve (lxpxh) (mm) (réfrigérateur/congélateur)	440x435x1105 / 431x435x597
Emballé (lxpxh) (mm)	620x709x2195
Poids brut/net (kg)	100/88

¹ appareil tête de série qualifié selon FD X15-40 - en température d'air pour une ambiance 22°C.

Limite de responsabilité : ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'est pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système est inopérant.